

FRANCY O

Poltrona otorinolaringoiatrica ORL - Otorhinolaryngology chair (ENT)

Francy O, poltrona per uso O.R.L. e multifunzione. Prodotto altamente performante in termini di funzionalità e comfort con prestazioni ai vertici della categoria unite da un design moderno e elegante. Struttura in acciaio completamente verniciato con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. Capacità di carico molto elevata: 230 kg. La seduta è girevole di 90° gradi a dx e 90° a sx con bloccaggio manuale (rotazione totale della seduta di 180°). Kit di equipaggiamento standard di 4 ruote con freno a pedale.

I comandi elettrici sono gestiti da una pulsantiera e solo il comando di sollevamento può essere controllato anche tramite comando a pedale. La poltrona è specialistica ORL ma è molto utilizzata anche per diagnostica in genere. Disponibili numerosi accessori (vedi lista accessori) per rendere maggiormente funzionale il prodotto.

Francy O, chair for ENT and multifunction. High performance product in terms of functionality and comfort with top class performance combined with a modern and elegant design. Steel structure completely varnished with epoxy powder with antimicrobial characteristics. Very high load capacity: 230 kg. The seat is rotating 90 ° degrees to the right and 90 ° to the left with manual locking (total rotation of the seat of 180 °) Standard 4-wheel kit with foot brake. The electric controls are managed by a push-button panel and only the lifting command can also be controlled by foot control.

The chair is specialized ENT but is also widely used for diagnostics in general. Numerous accessories are available (see accessories list) to make the product more functional.



Movimenti elettrici e indipendenti a bassa tensione (disponibile in due versioni: 3 o 4 attuatori lineari 24V-DC): sollevamento elettrico, angolo schienale 180° elettrico, gambale elettrico, trendelenburg elettrico (nella versione a 3 motori la movimentazione del gambale e schienale è sincronizzata). Braccioli in poliuretano sincronizzati con lo schienale e regolabili in rotazione. Sedile, schienale e gambale sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all'usura. Dotata di pedana poggiapiedi ribaltabile.



Low voltage electric and independent movements (available in two versions: 3 or 4 linear actuators 24V-DC): electric lifting, 180° electric back angle, electric leg rest, electric trendelenburg (in the 3-motor version the leg rest and backrest movement is synchronized). Armrests in polyurethane synchronized with the backrest and adjustable in rotation. Seat, back and leg rest are covered in class 1 IM fireproof sky, antibacterial, antifungal, disinfectable and resistant to wear. Equipped with a folding footrest.

COMFORT



Pedana a scomparsa
Footboard retractable

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg



Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
143 kg

Seduta ruotabile
90°dx / 90° sx
Rotatable seat
90 ° right and 90 ° left



A.	570÷955 mm
B.	1420÷1805 mm
C.	1350 mm
D.	955 mm
E.	1785 mm
F.	0° ÷ -10° mm
G.	765 mm
H.	570 mm
I.	-3° ÷ -87° mm
J.	0° ÷ 90° mm

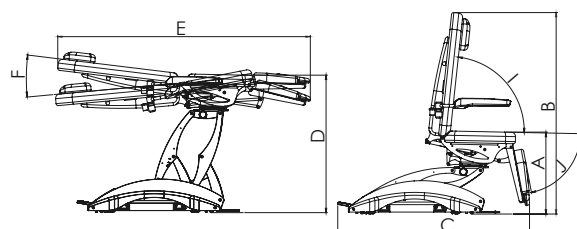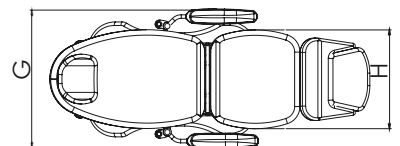

ACCESSORI_OPTIONALS



12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile
Adjustable height head rest



12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12500008
Pedaliera per UP/DOWN
Foot switch for UP/DOWN



12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder
stand

12500009
Batteria emergenza
Battery box



12900023
Barra porta accessori per schienale
Accessory mounting bar for back

12500002
Tapezzeria bicolore (schienale/seduta + gambale)
Bicolour padding (backrest/seat + leg rest)

12500003
Tapezzeria tricolore (schienale/seduta + gambale)
Tricolour padding (backrest/seat + leg rest)

12500010

**Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni**

- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale di visita (gestite da comando a pulsantiera)

- 2 posizioni di trattamento programmabili autonomamente dal medico (gestite da comando a pedale con tecnologia wireless)

Gestione movimentazioni elettriche tramite comando a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia wireless.



**Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions**

- 2 positions are preset by the firm: CPR and the initial position of the medical examination (they are managed by a push-button control)

- 2 positions are set freely by the doctor (a foot switch with wireless technology manages them)

The management of the electrical movements is organized through a foot switch with wireless technology

CARTELLA COLORI - COLOURS CHART

2DO	8I1	8H8	6KO	7FI	6KN	4L1
7FG	3CT	5H7	5HK	5HL	5HJ	41A
7FE	7ES	5HH	4I3	4HI	4HG	101
901	2DL	2EC	8HE	2E5	8H6	6M5
6MC						

Tappezzeria realizzata rigorosamente con l'utilizzo di materiale con caratteristiche antibatteriche ed antimicotiche; materiale ignifugo e con alta resistenza all'abrasione.

Upholstery made strictly with the use of materials with antibacterial and antimycotic properties; fireproof material and with high abrasion resistance

7/TT Med®